



HIFU 12D

FACIAL - CORPORAL

Tecnología estética no invasiva
para reafirmación y remodelación

- 4 manípulos especializados
- 12 cartuchos para diferentes profundidades
- Modos automático y manual



Grupo Versebien SL

Innovación · Confianza · Resultados

Cartuchos y aplicaciones

Configuraciones facial y corporal según zona y protocolo profesional



20.000 DISPAROS

8 CARTUCHOS

Cada cartucho permite hasta 20.000 disparos



FACIAL

3 CARTUCHOS

1,5 mm · 2,0 mm · 3,0 mm



CORPORAL

5 CARTUCHOS

3,0 mm · 4,5 mm · 6,0 mm · 9,0 mm · 12,0 mm



1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm



3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm 9,0 mm 12,0 mm



MANÍPULO LIPO-HIFU



600 DISPAROS

2 CARTUCHOS

Cada cartucho permite hasta 600 disparos




CORPORAL

8,0 mm · 13,0 mm



8,0 mm 13,0 mm


24 × 24 LÍNEAS

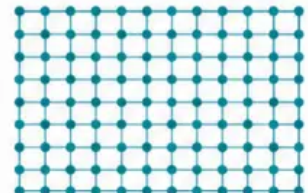

Área amplia de tratamiento


Mayor rapidez de aplicación

1 · VALORACIÓN INICIAL

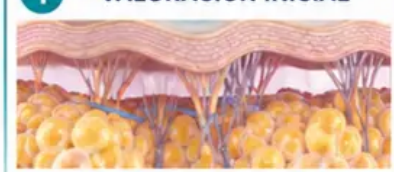

Delimitar la zona y aplicar gel conductor

2 · ENERGÍA FOCALIZADA

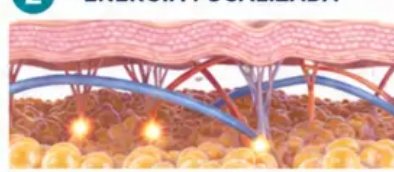

El ultrasonido actúa a la profundidad seleccionada

3 · EVOLUCIÓN PROGRESIVA



Respuesta gradual según el protocolo y cada persona



Sistema HIFU 12D 4 en 1

Cuatro tecnologías integradas en una única plataforma

4 MANÍPULOS ESPECIALIZADOS

Tecnología facial y corporal en una sola plataforma



MANÍPULO HIFU MULTILÍNEA



MANÍPULO HIFU 360°



MANÍPULO DEP



MANÍPULO LIPO-HIFU



Precisión facial y aplicación DEP

Dos manípulos complementarios para protocolos personalizados

MANÍPULO HIFU 360°

40.000 DISPAROS

2 CARTUCHOS
Cada cartucho permite hasta 40.000 disparos

TRAZADO LINEAL 360°
Favorece la firmeza de la piel

360°

1,5 mm + 3,0 mm

FACIAL
1,5 mm · 3,0 mm



The diagram illustrates the HIFU 360° device, a black handheld tool with a white applicator tip. It shows the device being used on a woman's face, with arrows indicating the treatment path. A circular graphic highlights '40.000 DISPAROS' (40,000 shots). Below, two interchangeable cartridges are shown with dimensions '1,5 mm + 3,0 mm'. A final graphic shows a face with treatment points and the text 'FACIAL 1,5 mm · 3,0 mm'. The Versebien logo is at the bottom right.

MANÍPULO DEP

APLICACIÓN NO INVASIVA
Favorece la penetración de activos cosméticos

PIEL
ACTIVOS COSMÉTICOS
CANALES ACUOSOS

APLICACIÓN FACIAL
Distribución uniforme de los activos

Tratamiento cómodo y localizado



The diagram illustrates the DEP device, a black handheld tool with a circular applicator head. It shows the device being used on a woman's face, with arrows indicating the treatment path. A circular graphic highlights 'APLICACIÓN NO INVASIVA' (Non-invasive application) and 'Favorece la penetración de activos cosméticos' (Favors the penetration of cosmetic active ingredients). Below, a cross-section of the skin is shown with 'PIEL' (Skin), 'ACTIVOS COSMÉTICOS' (Cosmetic active ingredients), and 'CANALES ACUOSOS' (Aquatic channels). A final graphic shows a face with treatment points and the text 'APLICACIÓN FACIAL' (Facial application) and 'Distribución uniforme de los activos' (Uniform distribution of active ingredients). The Versebien logo is at the bottom right.

Aplicaciones y selección del protocolo

La valoración profesional determina zona, profundidad y parámetros de trabajo

HIFU 12D FACIAL

Zonas habituales

- Frente y óvalo facial
- Mejillas y mentón
- Doble mentón
- Cuello y escote

Objetivo estético

- Mejorar la firmeza
- Definir visualmente el contorno
- Favorecer la remodelación progresiva

LIPO-HIFU CORPORAL

Zonas habituales

- Abdomen y flancos
- Brazos y espalda
- Muslos y cartucheras
- Glúteos y rodillas

Duración orientativa

- Entre 30 y 90 minutos según zona
- Preparación y marcaje incluidos
- Hasta 4 sesiones según valoración

SECUENCIA DE TRABAJO

- 1 **Valoración previa**
- 2 **Selección del cartucho**
- 3 **Marcaje y gel conductor**
- 4 **Aplicación por zonas**
- 5 **Recomendaciones posteriores**

Uso profesional. Los resultados pueden variar según la zona y la respuesta individual.

Especificaciones principales

HIFU 12D Facial - Corporal | Grupo Versebien SL

Modelo comercial	HIFU 12D
Aplicación	Facial y corporal
Pantalla	Táctil a color
Energía	0,1 - 3,0 J
Modos de trabajo	Automático y manual
Manípulos	HIFU Multilínea · HIFU 360° · LIPO-HIFU · DEP
Cartuchos	12 unidades para diferentes profundidades
HIFU Multilínea	1,5 · 2,0 · 3,0 · 4,5 · 6,0 · 9,0 · 12,0 mm
HIFU 360°	1,5 y 3,0 mm
LIPO-HIFU	8,0 y 13,0 mm · 24 × 24 líneas
Alimentación	220 V · 50/60 Hz



Innovación · Confianza · Resultados